


AMPLATZER™ Amulet™
Left Atrial Appendage Occluder



Cuando el objetivo es la oclusión total.

El dispositivo AMPLATZER™ Amulet™ posee un exclusivo diseño que proporciona un cierre completo de la orejuela auricular izquierda a la altura del orificio de entrada.

- El trenzado de nitinol flexible permite amoldarlo a orejuelas con distintos tipos de anatomías.
- El amplio rango de tamaños hace posible el cierre de orejuelas auriculares izquierdas con zonas de apoyo de 11 a 31 mm de diámetro¹.
- El posicionamiento proximal del dispositivo optimiza la colocación, independientemente de la anatomía distal o la presencia de múltiples lóbulos distales¹.

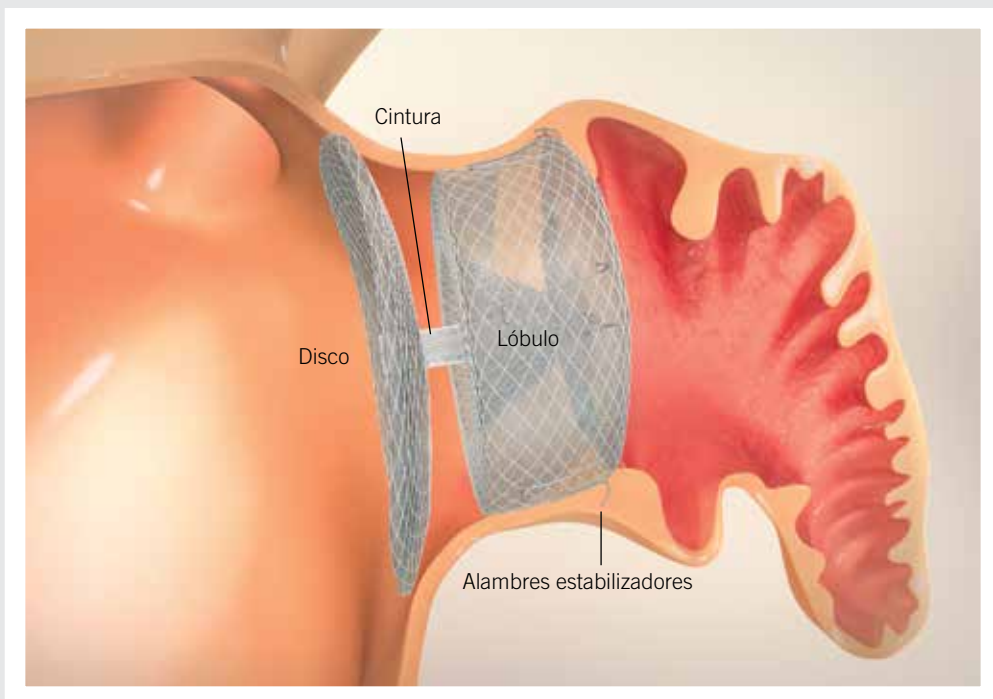

ESPERE LO MEJOR DE LO MEJOR

DE SU OCLUSOR DE OREJUELA AURICULAR IZQUIERDA:

Facilidad de uso, el más amplio surtido de tamaños y un diseño que posibilita el cierre completo del ostium.

Las anatomías de las orejuelas se presentan en diferentes tamaños y formas, y su dispositivo para la prevención del ACV debe poder adaptarse a todas ellas. El oclisor de orejuela izquierda AMPLATZER™ Amulet™, desarrollado a partir de la probada tecnología AMPLATZER™, ofrece un disco y un lóbulo amoldables diseñados para cerrar por completo la orejuela auricular izquierda, con el más amplio surtido de tamaños del mercado actual y con mayor facilidad de uso.

Aproveche la facilidad de uso y la precisión al colocar el dispositivo.

Exija un sistema de oclusión de la OAI que ofrezca:

- Un procedimiento simplificado de preparación y purgado
- Un cable diseñado en una sola pieza que facilita la implantación y mejora el control
- Una cintura más larga que aumenta la flexibilidad en la colocación del dispositivo dentro de la OAI
- La capacidad de recaptura y reposicionamiento completo para optimizar la implantación

Con la tecnología AMPLATZER™, la elección está clara.

El dispositivo AMPLATZER™ Amulet™ es una terapia alternativa para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en sus pacientes con FA². El ocluidor aprovecha la probada tecnología del dispositivo AMPLATZER™ Cardiac Plug, el cual ha demostrado:

- Una tasa de oclusión del 98% con un cierre completo de la OAI en el seguimiento³
- Un éxito técnico demostrado del 97%³
- Una reducción del riesgo de ACV del 63% respecto a la tasa prevista en poblaciones de pacientes con alto riesgo de ACV³
- Una disminución del riesgo de hemorragia del 60% respecto al valor previsto en las puntuaciones HAS-BLED³



Un procedimiento eficiente que le permite mantener el control.




Mida el orificio de entrada de la orejuela auricular izquierda, la zona de apoyo y la profundidad



Despliegue el lóbulo del ocluidor AMPLATZER™ Amulet™ en la zona de apoyo de la OAI



Despliegue el disco del dispositivo AMPLATZER a fin de cubrir por completo el ostium de la OAI

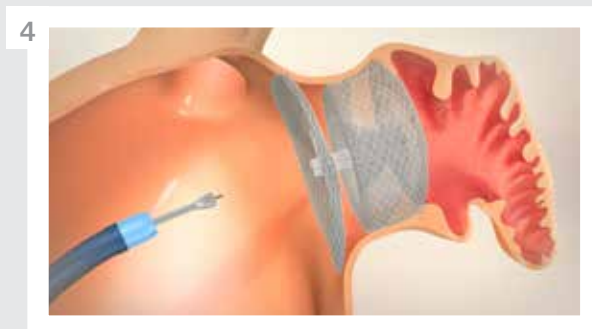

Libere el dispositivo AMPLATZER Amulet™ del cable de implantación

Información para pedidos

Descripción	Referencia	Tamaño
AMPLATZER™ Amulet™ Left Atrial Appendage Occluder	9-ACP2-007-016	16 mm
	9-ACP2-007-018	18 mm
	9-ACP2-007-020	20 mm
	9-ACP2-007-022	22 mm
	9-ACP2-010-025	25 mm
	9-ACP2-010-028	28 mm
	9-ACP2-010-031	31 mm
	9-ACP2-010-034	34 mm
Accesorios		
AMPLATZER™ TorqVue™ 45° x 45° Delivery Sheath	9-TV45x45-12F-100	12 Fr
AMPLATZER TorqVue 45° x 45° Delivery Sheath	9-TV45x45-14F-100	14 Fr
AMPLATZER™ Guidewire	9-GW-002	0,035 pulg.



- Instrucciones de uso de AMPLATZER Amulet
- National Institute for Health and Care Excellence. Atrial fibrillation: the management of atrial fibrillation - NICE clinical guideline 180 (agosto de 2014).
- Tzikas y cols. "Multicenter Experience with the Amplatzer Cardiac Plug (ACP)." Presentado en la conferencia TCT en San Francisco, California (EE. UU.) el 27 de octubre de 2013. Las diapositivas se pueden consultar en Internet: <http://www.tctmd.com/show.aspx?id=120442>

PRECAUCIÓN: El dispositivo no está disponible en los Estados Unidos. El producto descrito ha obtenido la certificación para el mercado CE. Es posible que el dispositivo ilustrado no se comercialice en todos los países. Consulte a su representante de St. Jude Medical para averiguar si el producto puede adquirirse en su país.

Breve resumen: Antes de usar estos dispositivos, revise las instrucciones de uso, donde encontrará una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas y modo de empleo. A menos que se especifique lo contrario, el símbolo ™ indica que el nombre es una marca comercial de St. Jude Medical, o una licencia concedida a esta empresa o a una de sus filiales. ST. JUDE MEDICAL y el símbolo con nueve cuadrados son marcas comerciales o de servicio de St. Jude Medical, Inc. y sus empresas asociadas.

© 2014 St. Jude Medical, Inc. Reservados todos los derechos.

St. Jude Medical Inc.
Global Headquarters
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, Minnesota 55117
USA
T +1 651 756 2000 | F +1 651 756 3301

St. Jude Medical S.C., Inc.
Americas Division
6300 Bee Cave Road
Bldg. Two, Suite 100
Austin, TX 78746
USA
T +1 512 286 4000 | F +1 512 732 2418

SJM Coordination Center BVBA
The Corporate Village
Da Vincilaan 11-Box F1
B-1935 Zaventem, Belgium
T +32 2 774 68 11 | F +32 2 772 83 84

St. Jude Medical Brasil Ltda.
Rua Itapeva, 538
5° ao 8° andares
01332-000 – São Paulo – SP
Brazil
T +55 11 5080 5400 | F +55 11 5080 5423

St. Jude Medical (Hong Kong) Ltd.
Suite 1608, 16/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong SAR
T +852 2996 7688 | F +852 2956 0622

St. Jude Medical Japan Co., Ltd.
Shiodome City Center 15F
1-5-2 Higashi Shinbashi, Minato-ku
Tokyo 105-7115
Japan
T +81 3 6255 6370 | F +81 3 6255 6371

St. Jude Medical Australia Pty, Ltd.
17 Orion Road
Lane Cove, NSW 2066
Australia
T +61 2 9936 1200 | F +61 2 9936 1222

SJMprofessional.com